

## Stap 1 Start



- Open de verpakking.
- Haal het wattenstokje en het buisje eruit.

## Stap 2 Afname

### Wondkweek



- Maak de wond schoon met fysiologisch zout.
- Neem een kweek af door wattenstokje over de bodem van de wond te strijken.

### Keelkweek




- Neem een keelkweek af door met het wattenstokje achterin de keel te strijken

### Vagina




- Neem een vaginakweek af door het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina te brengen.
- Draai het wattenstokje langs de vaginawand.

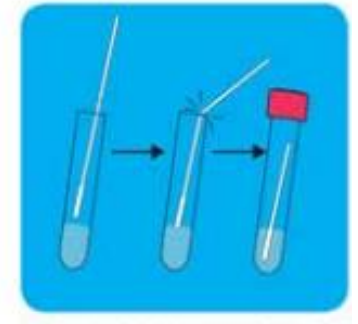

- Breng het wattenstokje na het maken van de kweek in de buis en breek het aan de bovenkant van de buis af.
- Draai de dop goed vast.

**Z.O.Z.**

### Stap 3 Identificatie

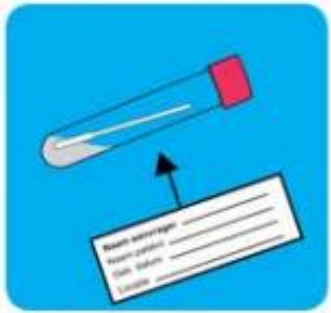


- Vul de patiëntgegevens in op het etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.


### Stap 4 Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

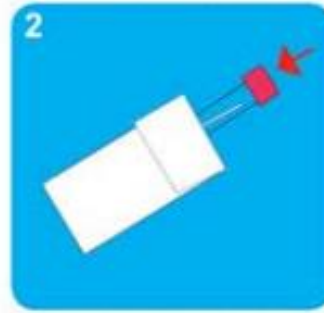

- Wikkel de buis in het absorptiepiertje

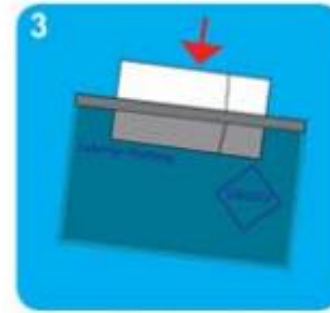

- Stop de afnamebuis en het absorptiepiertje in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.

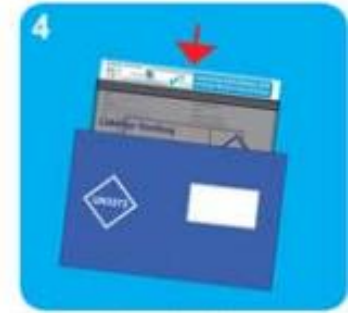

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

*Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.*